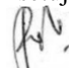


 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	<b>INSTRUKSI KERJA</b>		Disetujui	Tanggal	Hal.
				23 - 01 - 2024	1/3
	<b>PENGAMBILAN DAN PENANGANAN SAMPEL AIR DAN ES PLANT READY MEAL UNTUK UJI CEMARAN MIKROBIOLOGI</b>		Dibuat	No. Dokumen	Revisi
				IK QR 41	00

## 1. BAHAN DAN PERALATAN


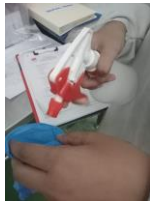




- 1.1. Plastik PE 15x30 cm
- 1.2. Alkohol 70%
- 1.3. Sarung tangan karet
- 1.4. Scope/centong
- 1.5. Spidol
- 1.6. Gelas ukur


## 2. TITIK SAMPLING



- 2.1 Keran air di ruang nasi (air untuk nasi)
- 2.2 Keran air di ruang mie (air untuk mie)
- 2.3 Keran air di ruang cooking (air untuk daging)
- 2.4 Keran air softener
- 2.5 Ruang flake ice

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tanggal	Hal.
		23 - 01 - 2024	2/3
	<b>PENGAMBILAN DAN PENANGANAN  SAMPEL AIR DAN ES PLANT READY  MEAL UNTUK UJI CEMARAN  MIKROBIOLOGI</b>	No. Dokumen	Revisi
		IK QR 41	00

### 3. PENGAMBILAN SAMPEL

1	Ambil sampel air sebanyak $\pm$ 50-100 ml sesuai dengan titik sampling di atas serta sampel flake ice sebanyak $\pm$ 50-100 g.	
2	Siapkan bahan dan peralatan.	
3	Semprotkan alkohol 70% ke sarung tangan yang akan dipakai, kemudian semprotkan juga ke area sekeliling permukaan atas plastik bagian luar dan dalam.	
4	Setiap kemasan sampel diberi kode menggunakan spidol sesuai dengan titik dan tanggal pengambilan sampel.	
5	Semprotkan alkohol 70% ke keran air dan area sekitar titik sampling, kemudian buka keran air yang akan diambil sampel, biarkan air mengalir beberapa saat kemudian ambil sampel air.	
6	Untuk pengambilan sampel flake ice menggunakan scope/centong yang sudah disemprotkan alkohol 70%, ambil flake ice di bagian tumpukan dalam dan pastikan bukan bagian atas.	
7	Teknik pengambilan sampel air dan flake ice jangan sampai menyentuh bagian dalam permukaan atas plastik.	

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA	Tanggal	Hal.
		23 - 01 - 2024	3/3
	<b>PENGAMBILAN DAN PENANGANAN  SAMPEL AIR DAN ES PLANT READY  MEAL UNTUK UJI CEMARAN  MIKROBIOLOGI</b>	No. Dokumen	Revisi
		IK QR 41	00

8	Sampel yang sudah diambil lalu diikat rapat, lalu semprotkan kembali menggunakan alkohol 70% ke sekeliling bagian ikatan plastik.	
9	Sampel yang sudah diambil dikumpulkan ke dalam plastik yang baru.	
10	Sample dicatat di form <i>Laboratory Sample Submission Report</i> dan dikirim ke bagian laboratorium untuk keperluan analisa.	
11	Periode pengambilan sampel adalah setiap hari.	